


INVESTEER IN EEN NIEUWE XO FLEX 2020-UNIT EN VERKOOP ONS UW FLEX INTEGRAL VOOR €12.000,-!

Maak als eigenaar van een FLEX Integral-unit nu gebruik van dit unieke aanbod. Check alle onderstaande details en onthoud dat de aanbieding enkel geldig is voor bestellingen die uiterlijk op 13 december 2019 zijn ontvangen.

Let op, sinds 1 oktober 2019 worden er geen reserveonderdelen voor de Flex Integral-unit meer vervaardigd! We leveren deze reserveonderdelen alleen nog zolang deze op voorraad zijn.

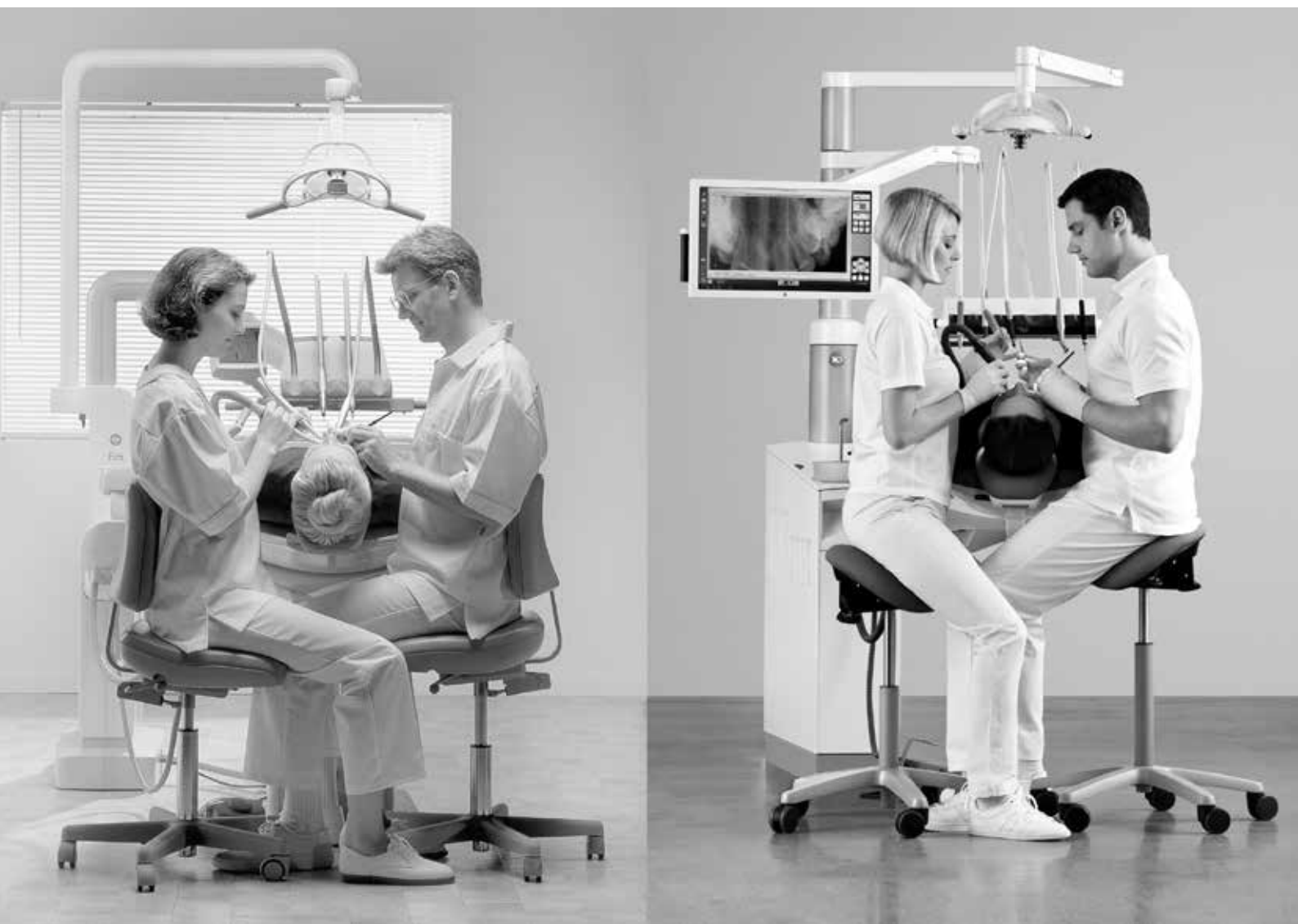

ARSEUS DENTAL
Advies, Aandacht, Attent



* De aanbieding is geldig voor levering van een nieuwe XO FLEX 2020-unit uiterlijk tot 28-02-2020. In geval van volle productiecapaciteit op de gewenste levertijd, behoudt XO CARE zich het recht voor de levertijd te wijzigen. We trekken een bedrag van € 12.000,- af van de gefactureerde XO FLEX 2020-unit incl. BTW.

DE XO FLEX 2020-UNIT - DE EVOLUTIE VAN DE FLEX INTEGRAL

De Flex Integral is één van de beste tandheelkundige units van zijn tijd. XO FLEX 2020 brengt deze erfenis naar het volgende niveau.

VERBETERINGEN OP DE XO FLEX 2020

- De nieuwe XO Ambidex afzuigslanghouders zijn uiterst flexibel en bieden de mogelijkheid de positie van deze slangen in slechts enkele seconden te veranderen naar waar u maar wilt.
- Elk instrument wordt individueel gebalanceerd met behulp van een mechanische veer. Instrumenten wegen hierdoor minder en trekken niet. Maximale gevoeligheid wordt behouden en zonder spanningen op onderarmen en polsen.
- Langere instrumentophangingen verhogen de beweegbaarheid van instrumenten en laten toe dat de instrumentbrug verder van de mond van de patiënt te plaatsen is.
- Tot 6 instrumenten op de unit mogelijk.
- Integratie van XO Osseo en peristaltische pomp - de chirurgische en endodontische motor met hoge torque zorgen voor geavanceerde chirurgische behandelingen.
- De instrumentbrug met mechanische veer en schijfslagers is gemakkelijker te plaatsen.
- Gescheiden water- en luchttoevoer naar instrumenten van de unit voor preciezere aanpassing van de hoeveelheid spraywater en volledig droge lucht.
- De vorm van de XO FLEX 2020 patiëntenstoel voorkomt dat patiënten van de stoel glijden tijdens beweging.
- Het XO zachte kussen past zich aan het lichaam van de patiënten aan en laat de huid ademen.
- De patiëntenstoel geeft meer ruimte voor de benen van het tandheelkundig team, waardoor comfortabel werken met vier handen tegelijk mogelijk is in posities van 9 - 12 uur.
- Bredere, geïntegreerde elleboogsteunen voorkomen dat de armen van uw patiënt van de bekleding glijden.
- De kop van de XO-operatielamp kan langs 3 assen worden aangepast, waardoor de lichtstraal parallel aan de kijkrichting kan worden geplaatst.
- De kleurweergave van het LED-licht is geschikt voor kleurbeoordeling.
- De lamp heeft geen koelventilator nodig en werkt stil.
- Met het 22-inch XO HD-display op een lange scharnierende arm kan men het scherm aan een liggende patiënt tonen.
- De instrumentprogramma's op de XO FLEX 2020 kunnen worden beheerd met behulp van XO Smart Link-software op een externe pc. De software is een perfecte oplossing voor meerdere gebruikers die gemakkelijk te gebruiken en te configureren is.
- XO Suction Desinfection heeft een ingebouwde desinfecterende dispenser voor een veel snellere en handiger afzuigdesinfectie.
- De XO FLEX 2020 neemt dezelfde ruimte in beslag als Flex Integral. Beide units hebben dezelfde vloerconnectoren, daarom kan XO FLEX eenvoudig worden geïnstalleerd op de plaats van de Flex Integral.

